



PORTFÓLIO DE PRODUTOS

Diagnóstico à beira do leito e coleta segura

Gasometria e marcadores cardíacos em segundos, coletores arteriais pré-heparinizados e dispositivos com retração automática de agulha.

RADIOMETER RETRACTABLE SET MEDIKAL METEROMEGA

01

BLOCO 01 DE 03

Gasometria, marcadores e gestão PoCT

Cinco analisadores Radiometer — do portátil de 65 μ L ao sistema de bancada com 18 parâmetros — e um único sistema de gestão do ponto de cuidado.



ABL90 Flex Plus

ANALISADOR DE GASES SANGUÍNEOS · POCT

Resultados confiáveis de até 19 parâmetros em 35 segundos, otimizando o tempo na linha de cuidados. Usa 65 µL de amostra com entrada automatizada.

19

parâmetros

35 s

tempo de resposta

65 µL

volume de amostra

MENU DE TESTES

pH · gases sanguíneos (pO₂, pCO₂) · eletrólitos (Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻) · oximetria (tHb, sO₂, O₂Hb, COHb, MetHb, HHb, HbF) · metabólitos (Glu, Lac, Bili) · ureia · crea

Anvisa 10301160203

ABL90 Flex

ANALISADOR PORTÁTIL

Precisa de 65 μ L de sangue e não exige preparo da amostra antes da inserção. Resultados em 35 segundos — o mais rápido do mercado.

65 μ L

volume de amostra

35 s

tempo de resposta

Portátil

sem preparo da amostra

MENU DE TESTES

pH · gases sanguíneos (pO_2 , pCO_2) · eletrólitos (Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Cl^-) · oximetria (tHb, sO_2 , O_2Hb , COHb, MetHb, HHb, HbF) · metabólitos (Glu, Lac, Bili)

Anvisa 10301160226





ABL9 Flex

POINT OF CARE ESSENCIAL

Analizador de gases sanguíneos Point of Care Testing, com resultados rápidos, confiáveis e manutenção simplificada.

PARÂMETROS MEDIDOS

pH · gases no sangue (pO_2 , pCO_2) · eletrólitos (Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Cl^-) · metabólito (Lac) · Hct

Anvisa 10301160150

ABL800 Flex

BANCADA LABORATORIAL · 18 PARÂMETROS

Alta precisão e recursos tecnológicos que facilitam o fluxo de trabalho e reduzem erros, com combinação de até 18 parâmetros no mesmo equipamento.

MEDE

pH · gases sanguíneos (pO_2 , pCO_2) · eletrólitos (Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Cl^-) · oximetria (tHb, sO_2 , O_2Hb , COHb, MetHb, HHb) · metabólitos (Glu, Lac, Creatinina)

Anvisa 10301160230





AQT90 Flex

MARCADORES CARDÍACOS EM SANGUE TOTAL

Múltiplos marcadores em um único instrumento, em sangue total ou plasma. Homogeneização e medição automáticas, sem preparo da amostra e com correlação completa com os métodos laboratoriais.

30/h

amostras por hora

8

ensaios no menu

MENU DE TESTES

Troponina I · Troponina T · CK-MB · Mioglobina · NT-proBNP · CRP · β hCG · D-dímero

Anvisa 10301160185

Sistema AQUIRE

GESTÃO DA PLATAFORMA POINT OF CARE

Gestão de toda a plataforma de testes no ponto de cuidado em um único sistema, com acesso rápido aos dados dos testes e notificações em caso de ocorrências.



CONFORMIDADE

Cumprimento normativo incomparável no ponto de cuidado.

IDENTIFICAÇÃO

Resultados dos pacientes correta e facilmente identificados.

CONSOLIDAÇÃO

Dados dos dispositivos PoCT reunidos em um sistema de TI centralizado.

02

BLOCO 02 DE 03 · INCLUI NOVIDADE 2026

Coletores arteriais pré-heparinizados

Dois volumes, a mesma heparina seca e balanceada eletroliticamente: Set Medikal 2 mL e MeterOmega SyringeABG™ 3 mL.

Coletor de sangue arterial

SET MEDIKAL · 2 ML

- 01 Coletor arterial para análise de pH, gases no sangue, oximetria, eletrólitos e metabólitos.
- 02 Pré-heparinizado com heparina seca e equilibrada eletroliticamente — não captura os íons Na^+ , K^+ e Ca^{2+} do sangue.
- 03 Previne riscos de coágulos, interferências nos resultados de eletrólitos e diluição da amostra.
- 04 Preenchimento de 0,5 a 1,5 mL, facilitando a coleta de neonatos a idosos.
- 05 Ponta luer padrão, compatível com qualquer linha arterial ou venosa.
- 06 Totalmente isento de silicone, que a médio e longo prazo reduz a performance dos analisadores.



HEPARINA	80 UI, seca e equilibrada eletroliticamente
-----------------	---

VOLUME	2 mL
---------------	------

BICO	Luer padrão
-------------	-------------

ANVISA	10301160236
---------------	-------------



MeterOmega
— Mega Health Care —

SyringeABG™ Arterial Blood Gas Sampler

METEROMEGA · REF. ABS03N · 3 ML

Seringa de gasometria sem agulha, de uso único, estéril e esterilizada por óxido de etileno. A parede interna do cilindro é uniformemente revestida com heparina liofilizada e balanceada para efeito anticoagulante. Não use para injeção.

3 mL

volume nominal

1,6 mL

amostra
recomendada

80 UI

heparina
liofilizada

2 anos

prazo de
validade

INDICAÇÃO

Coleta de amostras de sangue arterial para uso em diagnóstico in vitro. Bico luer (lock ou slip). Agulha não incluída.

ARMAZENAMENTO

Ambiente ventilado, 2 °C a 35 °C, umidade relativa até 80%, sem gás corrosivo.

03

BLOCO 03 DE 03


Segurança do profissional ▪ NR-32

Agulhas, suportes para tubo e seringas de insulina com retração automática
— a agulha recolhe para dentro do dispositivo antes da remoção.

Agulhas EasyPoint®

RETRAÇÃO AUTOMÁTICA · DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

- Após a ativação, a agulha é automaticamente retraída para dentro do dispositivo.
- Projetadas para minimizar a exposição a agulhas contaminadas e reduzir o risco de ferimentos.
- Destinadas à injeção percutânea e/ou à aspiração de fluidos.
- Compatíveis com seringas luer lock e luer slip, inclusive previamente preenchidas.
- Disponíveis em ampla variedade de calibres, de 18G a 30G.

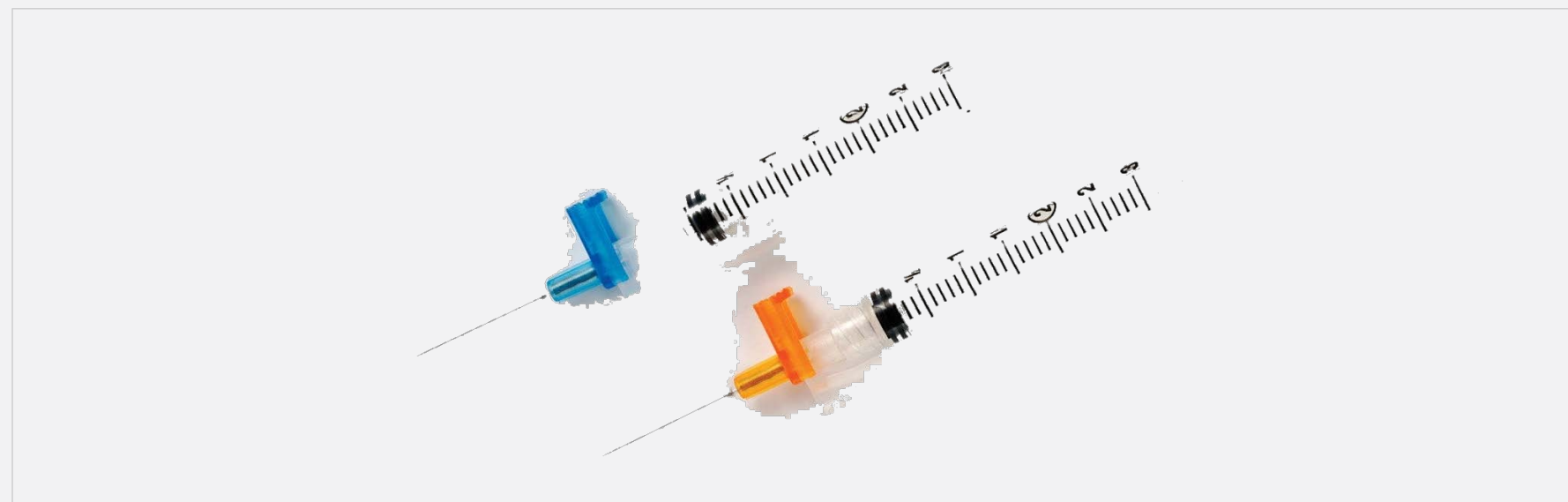

Agulhas EasyPoint® — referências

Agulha hipodérmica com dispositivo de segurança · caixa com 1 × 50 unidades

REF.	CALIBRE	DIMENSÃO
82011	25G × 1"	0,50 × 25 mm
82031	23G × 1"	0,60 × 25 mm
82091	25G × 5/8"	0,50 × 16 mm
82211	30G × 1/2"	0,30 × 13 mm
85241	26G × 1/2"	0,45 × 13 mm
85021	22G × 1"	0,70 × 25 mm
85041	21G × 1"	0,80 × 25 mm
85061	20G × 1"	0,90 × 25 mm
85081	18G × 1"	1,20 × 25 mm
85091	18G × 1 1/2"	1,20 × 40 mm


REF.	CALIBRE	DIMENSÃO
85111	25G × 1 3/16"	0,50 × 30 mm
85121	22G × 1 3/16"	0,70 × 30 mm
85131	23G × 1 3/16"	0,60 × 30 mm
85141	21G × 1 3/16"	0,80 × 30 mm
85161	20G × 1 3/16"	0,90 × 30 mm
85181	18G × 1 3/16"	1,20 × 30 mm
85211	25G × 1"	0,50 × 25 mm
85231	23G × 1"	0,60 × 25 mm
85291	25G × 5/8"	0,50 × 16 mm

Suporte para tubo de coleta com agulha EasyPoint®

RETRAÇÃO AUTOMATIZADA · ATIVAÇÃO DENTRO DA VEIA

- Permite ativação dentro da veia, reduzindo eficazmente a exposição à agulha contaminada.
- Toda a agulha, extremidade frontal e traseira, fica coberta após a retração.
- Agulha pré-fixada — não é necessária montagem.
- Aba integrada e discreta proporciona visualização ideal do local da punção.
- Ativação com uma só mão: mãos e dedos permanecem atrás da agulha.
- Impede a remoção da agulha do suporte, conforme exigido pela NR-32. Uso único.

REF.	PRODUTO
26011	22G × 1 1/4" (0,70 × 32 mm) · caixa 1 × 25 unidades
26021	21G × 1 1/4" (0,80 × 32 mm) · caixa 1 × 25 unidades

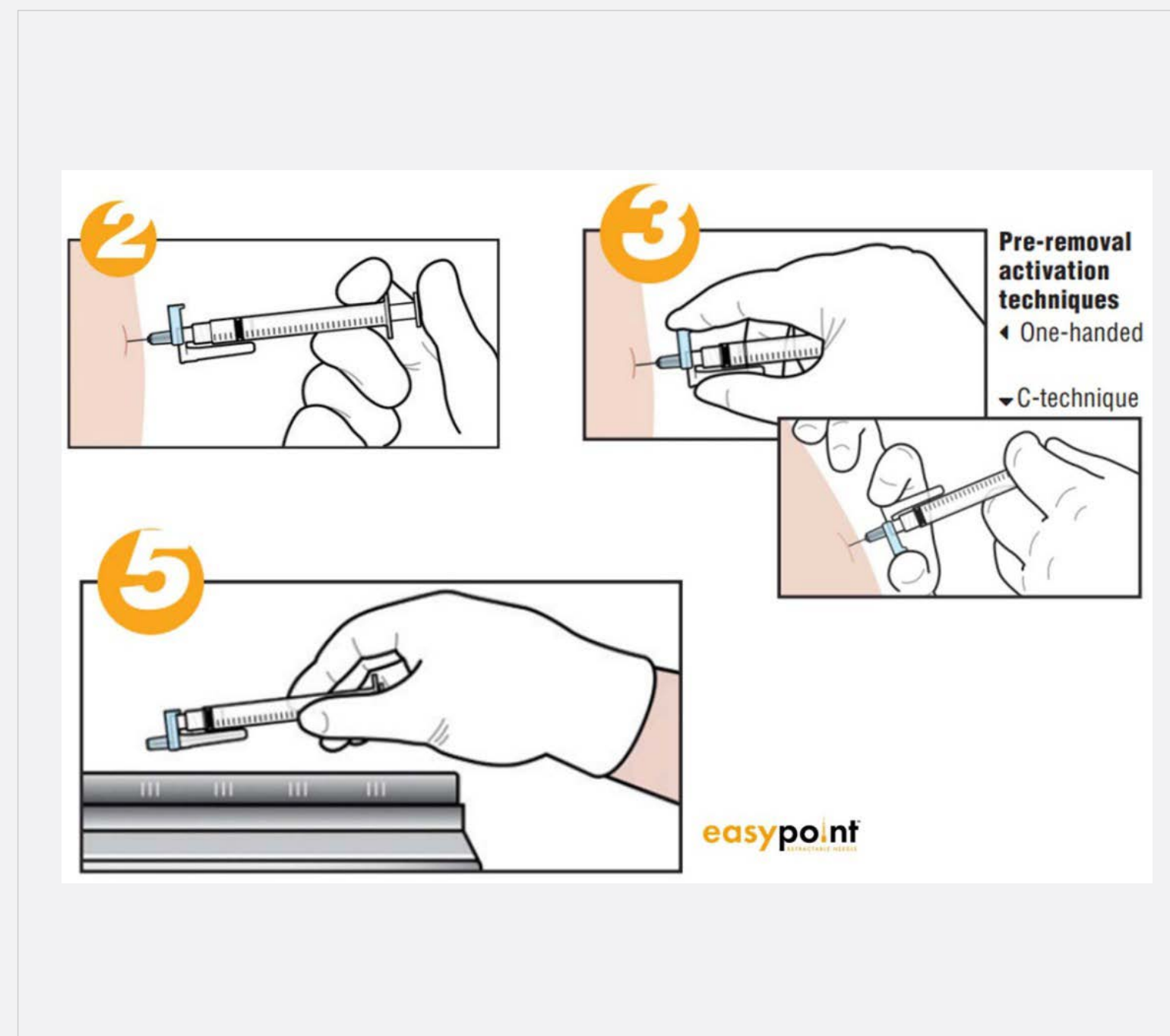

Seringas para insulina U-100 VanishPoint®

AGULHA FIXA · RETRAÇÃO AUTOMATIZADA

REF.	CAPACIDADE	AGULHA
15221	50 U · 0,5 mL	30G × 1/2" (0,30 × 12,7 mm)
15271	50 U · 0,5 mL	30G × 5/16" (0,30 × 8 mm)
15291	50 U · 0,5 mL	30G × 3/16" (0,30 × 5 mm)
10211	100 U · 1 mL	29G × 1/2" (0,33 × 12,7 mm)
10231	100 U · 1 mL	27G × 1/2" (0,40 × 12,7 mm)
10251	100 U · 1 mL	30G × 3/8" (0,30 × 9,5 mm)
10271	100 U · 1 mL	30G × 5/16" (0,30 × 8 mm)
10291	100 U · 1 mL	30G × 3/16" (0,30 × 5 mm)
Caixa com 100 seringas, embaladas unitariamente		



A agulha é automaticamente retraída do paciente para dentro do cilindro da seringa quando o êmbolo é totalmente pressionado — reduzindo o risco de acidentes com perfurocortantes.

- Administração precisa da dose
- Ambas as mãos atrás da agulha
- Não reutilizável após a ativação
- Minimiza o volume de descarte

O que a Scan Médica entrega junto com o produto

O equipamento é metade da entrega. A outra metade é a nossa presença: instalar, treinar, manter funcionando e repor o insumo antes de faltar.

01 · INSTALAÇÃO

Implantação no seu setor

Instalação dos equipamentos, configuração do menu de testes e acompanhamento das primeiras rotinas com a equipe.

02 · TREINAMENTO

Capacitação das equipes

Treinamento de enfermagem e laboratório na operação dos analisadores e no uso correto dos coletores e dispositivos de segurança.

03 · MANUTENÇÃO

Preventiva e corretiva

Manutenção preventiva programada e atendimento corretivo, para reduzir o tempo de equipamento parado.

04 · QUALIDADE

Acompanhamento técnico

Apoio no controle de qualidade e nas calibrações, mantendo a confiabilidade dos resultados no dia a dia.

05 · INSUMOS

Reposição programada

Planejamento do consumo de cartuchos, coletores e agulhas conforme o volume de exames de cada unidade.

06 · ATENDIMENTO

Canal direto com a Scan Médica

(11) 5196-6809

PRÓXIMOS PASSOS

Fale Conosco

VENDAS

(11) 5196-6809

vendas@scanmedica.com.br

SAC

(11) 5816-6241

sac@scanmedica.com.br

SAIBA MAIS

scanmedica.com.br

